


1000bp DNA Ladder, 250-12000bp

1000bp DNA 梯度指示，250-12000bp

产品简介

本产品指示带如下图，由 12,000 bp、8,000 bp、6,000 bp、5,000 bp、4,000 bp、3,000 bp、2,500 bp、2,000 bp、1,500 bp、1,000 bp、750 bp、500 bp 以及 250 bp 共 13 条线状双链 DNA 片段组成，其中指示带为 4,000 bp 和 1,500 bp，指示带浓度为 100 ng/5 μ L，其他条带均为 40 ng/5 μ L。该产品保存于 1 $\times$ DNA Loading Buffer 中，适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析，不适用于聚丙烯酰胺凝胶电泳分析。

1kb DNA Ladder

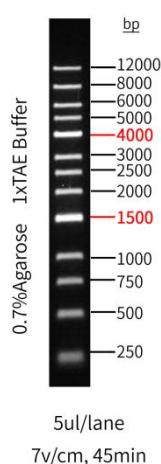

产品规格

产品货号	N132116S	N132116M
产品规格	100 T	10 $\times$ 100 T

产品组分

组分编号	组分名称	N132116S	N132116M
N132116-A	1 kb DNA Ladder	500 μ L	10 $\times$ 500 μ L
N132116-B	5 $\times$ DNA Loading Buffer	1 mL	10 $\times$ 1 mL

产品储存

室温或 2-8 $^{\circ}$ C 保存，有效期半年；-25 至 -15 $^{\circ}$ C 保存，有效期 1 年，避免反复冻融。

操作注意

1. 使用时产品需充分混匀，及时更换电泳缓冲液并使用新制备的凝胶，以达到理想的电泳结果。
2. 如使用该产品电泳时出现抹带、条带不清晰或弯曲等不理想情况，建议尝试用水稀释后上样。如常规宽度胶孔可用水稀释 5 倍后取 8-10 μ L 进行上样。

3. 更换新的染料进行染色时，或使用的琼脂糖胶含不同染料，应将电泳槽彻底清洗干净，再加入新的电泳缓冲液。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
5. 本产品仅作科研用途！

操作说明

1. Ladder 上样量为 5 μ L，若为宽胶孔，需适当增加上样量。
2. 建议使用 0.7-1.2% Agarose，电压 4-10 V/cm，1 $\times$ TAE 缓冲液电泳。
3. 通过 EB、Arcegen 核酸染料（Cat#N132109，无毒、适用紫外）等其他核酸染料通过泡染法进行染色时，在紫外灯下观察电泳条带。